

fill2light


LA NOUVELLE GÉNÉRATION
easyblast® fill2light



APPAREIL PHOTO
POUR LA
DOCUMENTATION



TECHNOLOGIE
TACTILE

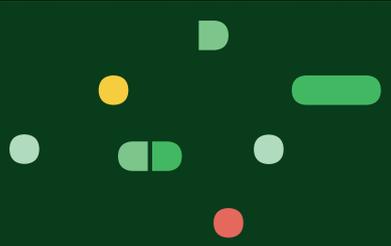

**PERFECTIONNER
LES PROCESSUS**

 **Omnicell™**

LA NOUVELLE GÉNÉRATION EASYBLIST® FILL2LIGHT

UN PROCESSUS DE REMPLISSAGE DES PILULIERS FIABLE ET EFFICACE

easyblast® fill2light est un système intelligent qui guide l'opérateur avec fiabilité tout au long du processus de remplissage des piluliers et améliore ainsi l'efficacité, allège la charge de travail et documente toutes les étapes.

PROCESSUS STANDARDISÉ

Le remplissage du pilulier est effectué après le transfert des données à partir de votre module de dispensation pour établissements pour personnes âgées en suivant un processus standardisé :

- Scanner le patient
- Scanner le médicament
- Photo après chaque médicament
- Fermeture du pilulier
- Génération automatique d'un protocole



1^{ère} étape : Scanner le patient



2^e étape : Scanner le médicament

PILULIERS CONDITIONNÉS AVEC FIABILITÉ - GAIN DE TEMPS

UN PROCESSUS SÉCURISÉ PAR CAPTATION D'IMAGE

VOS AVANTAGES

UN REMPLISSAGE À GUIDAGE OPTIQUE FIABLE GRÂCE À :

- Guidage de l'opérateur par rétroéclairage – y compris en cas de traitement discontinu (p. ex. tous les deux jours)
- Avertissements en cas d'erreur dans le choix du médicament ou de médicament déjà utilisé
- Enregistrement du numéro de lot et de la date d'expiration possible via un code Datamatrix 2D
- Moins d'erreurs au remplissage

DOCUMENTATION COMPLÈTE

- Une photo est enregistrée après chaque médicament
- L'ensemble du processus est documenté avec un protocole détaillé



3^e étape : Remplir le médicament



4^e étape : Enregistrer la photo

SAUVEGARDE DES DONNÉES SÉCURISÉES PAR PHOTOS

LES PLUS

GAIN DE TEMPS

- L'absence d'erreurs au remplissage implique moins de travail lors du double contrôle
- Il devient inutile de contrôler sans cesse avec l'étiquette

NETTOYAGE FACILE

- Surfaces lisses, donc faciles à nettoyer

CLARTÉ


- Impression des étiquettes avec photo des comprimés, numéros de lots et dates d'expiration



5^e étape : Photo d'illustration après chaque médicament



6^e étape : Fermer le pilulier

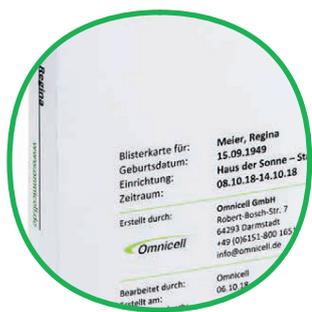

Informations sur le patient et la pharmacie sur le recto du pilulier



Protocole de traitement détaillé avec illustrations en couleurs et posologie



Informations sur le médicament à chaque moment de prise



Clarté optimale : jour de la semaine et moment de prise indiqués explicitement sur chaque alvéole, de même que les informations sur le patient

LE PILULIER EST PRÊT
COMPATIBLE AVEC TOUS LES PILULIERS OMNICELL 7 X 4 ET 7 X 5

VOTRE MÉTIER CHANGE,
ÉVOLUEZ AVEC LUI.



23 rue de la forêt - 67550 VENDENHEIM
T + 33 3 88 59 44 44 - info@omnicell.fr
www.omnicell.fr